

smiths medical

bringing technology to life

CADD-Legacy[®]

Microinfusori Portatili Computerizzati

Infusione Continua • Intermittente • PCA





CADD-Legacy®

Sicure, Semplici, Affidabili...

...anche in movimento

Sicurezza

Le caratteristiche di sicurezza presenti nelle CADD-Legacy® sono tali da segnalare o prevenire qualsiasi anomalia nella somministrazione. Il rilevatore di aria indicherà la presenza di eventuale aria nel set. I sensori di occlusione a monte e a valle della pompa rileveranno qualsiasi interruzione di flusso e il sensore della cassetta-serbatoio segnalerà il corretto attacco della stessa.

Semplicità

La tastiera essenziale e l'ampio schermo con messaggi in italiano rendono facile la programmazione e l'individuazione di eventuali problemi.

Affidabilità

Con una capacità di memoria degli ultimi 500 eventi, i microinfusori CADD-Legacy® forniscono un utile archivio dati per l'assistenza al paziente e la gestione della pompa. Queste informazioni possono essere scaricate su PC o stampate con l'impiego del software CADD-Diplomat®.

Durata

L'involucro solido e resistente della CADD-Legacy® è garanzia di robustezza, requisito essenziale per una pompa da usare anche in movimento.

Caratteristiche delle CADD-Legacy®

Schermo di facile lettura

Lo schermo ampio ed i messaggi chiari forniscono informazioni per la programmazione e l'individuazione di eventuali problemi.

Rilevatore della cassetta-serbatoio

Un apposito sensore segnala l'attacco improprio della cassetta o il distacco accidentale, anche parziale.

Rilevatore di occlusione

Sensori a monte e a valle della pompa avvertono il paziente in caso di interruzione nella somministrazione del fluido.

Tasto Acceso/Spento

Consente di mettere velocemente la pompa in stato di "stand by", allungando la durata delle batterie.

Archivio elettronico

Gli ultimi 500 eventi nella memoria della pompa possono essere scaricati su PC direttamente o da stazione remota (con l'impiego di un modem), utilizzando il software dedicato CADD-Diplomat®.



Specifiche dei Microinfusori CADD-Legacy® (nominali)

	CADD-Legacy™ 1	CADD-Legacy™ PLUS	CADD-Legacy™ PCA
Codice	21-6400-07	21-6500-07	21-6300-07
Profilo di infusione	Continua	Continua, Intermittente	Continua, Dose a richiesta, Bolo medico (profili indipendenti o in combinazione)
Indicazioni	Infusione continua, ml in 24 ore	Infusione continua e intermittente, ml/ora	Terapia del dolore
Vie di somministrazione	Venosa, arteriosa, sottocutanea, intraperitoneale, epidurale, spinale	Venosa, arteriosa, sottocutanea, intraperitoneale, epidurale, spinale	Venosa, arteriosa, sottocutanea, intraperitoneale, epidurale, spinale

Parametri da programmare

Unità di programmazione	ml	ml	ml, mg, mcg
Volume programmabile	1 ml - 9,999 ml o non in uso	1 ml - 9,999 ml o non in uso	1 ml - 9,999 ml o non in uso
Concentrazione di farmaco			0.1 - 100 mg/ml, 1 - 500 mcg/ml
Velocità infusione continua	1 - 3,000 ml in 24 ore	0.1 - 125 ml/ora	0 - 50 ml/ora, 0 - 5,000 mg/ora, 0 - 25,000 mcg/ora
Velocità inf. intermittente		0 - 125 ml/ora	
Velocità KVO		0 - 125 ml/ora	
Volume dose		0.1 - 1,000 ml	Dose a richiesta: 0 - 9.9ml, 0 - 990 mg, 4,950 mcg Bolo medico: 0 - 20 ml, 0-2,000 mg, 0 - 10,000 mcg
Durata dose		1 min - 24 ore	
Ciclo dose		10 min - 96 ore	
Inizio dose		Immediata o dopo 1 min - 96 ore	
Tempo di blocco dosi a rich.			5 min - 24 ore
Dosi a richiesta per ora			1 - 12

Parametri registrati

Volume serbatoio	0 - 9,999 ml	0 - 9,999 ml	0 - 9,999 ml (solo ml)
Volume somministrato	0 - 99,999.95 ml	0 - 99,999.95 ml	0 - 99,999.95 ml
Dose rimanente		1 min - 24 ore	
Dosi somministrate			0 - 999
Dosi richieste			0 - 999

Tutte le pompe CADD-Legacy®


Archivio elettronico		Caratteristiche di sicurezza		Altre specifiche	
Numero eventi	Gli ultimi 500 della storia della pompa	Rilevatore d'aria	Alto, Basso, Spento	Dimensioni	4.1 x 9.5 x 11.2 cm
Trasferimento dati	Collegamento a PC diretto o remoto (modem)	Sensore occl. a monte	Acceso, Spento	Peso	392 gr
Compatibilità Software	Sistema di Comunicazione CADD-Diplomat®	Sensore occl. a valle	Acceso	Accuratezza	± 6%, nominali
		Rilevatore cassetta	Acceso	Garanzia	1 anno
		Livelli di blocco	3		

Microinfusori Portatili Computerizzati

Prodotto	Opzioni	Codice
Pompe	CADD -Legacy™ 1	21-6400-07
	CADD -Legacy™ PLUS	21-6500-07
	CADD -Legacy™ PCA	21-6300-07
Accessori	Pulsante dose per PCA	21-6220-24
	Chiave per PCA	21-2303-24
	Morsetto per asta flebo	21-6118-24
	Adattatore per morsetto	21-6210-24
	Trasformatore per CA	21-6246-26
Custodie	Borsa nylon 50/100ml	21-6161-24
	Borsa nylon 250/500ml	21-6163-24
Trasferimento dati	Software CADD-Diplomat®	21-6141-51
	Cavo interfaccia	21-6250-50
Materiale monouso	Cassetta-serbatoio 50 ml	21-7001-24
	Cassetta-serbatoio 100 ml	21-7002-24
	Tubo di prolunga 76 cm (12 pz)	21-7060-24
	Tubo di prol. 152 cm con filtro (50 pz)	21-7106-24
	Set grossi volumi, attacco luer (12 pz)	21-7021-24
	Set grossi volumi, perforatore, con plasticizzante TOTM (12 pz)	21-7023-24



Pulsante dose per PCA

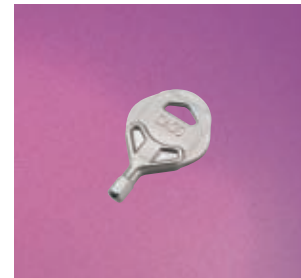

Chiave per PCA



Morsetto per asta flebo



Trasformatore per CA



Borse nylon



Cassetta e set per grossi volumi

CADD-Legacy, è un marchio registrato del Gruppo Smiths plc.
Riferimento No. IN/0010/I - 03/06



0473

Smiths Medical Italia S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa:

Via della Stazione, 2 - 04013 Latina
Tel. 0773 40841
Fax 0773 4084804

Uffici Commerciali:

Viale Europa, 68 - 20090 Cusago MI
Tel. +39 02 90165359 - Fax +39 02 90165360
CustomerService.Italia@smiths-medical.com

smiths medical

bringing technology to life

www.smiths-medical.com

ISO 13485:1996
MD 68025

